




# PleurX™

Sistema de Cateter Pleural

Gerencie derrames pleurais  
recorrentes, em casa.

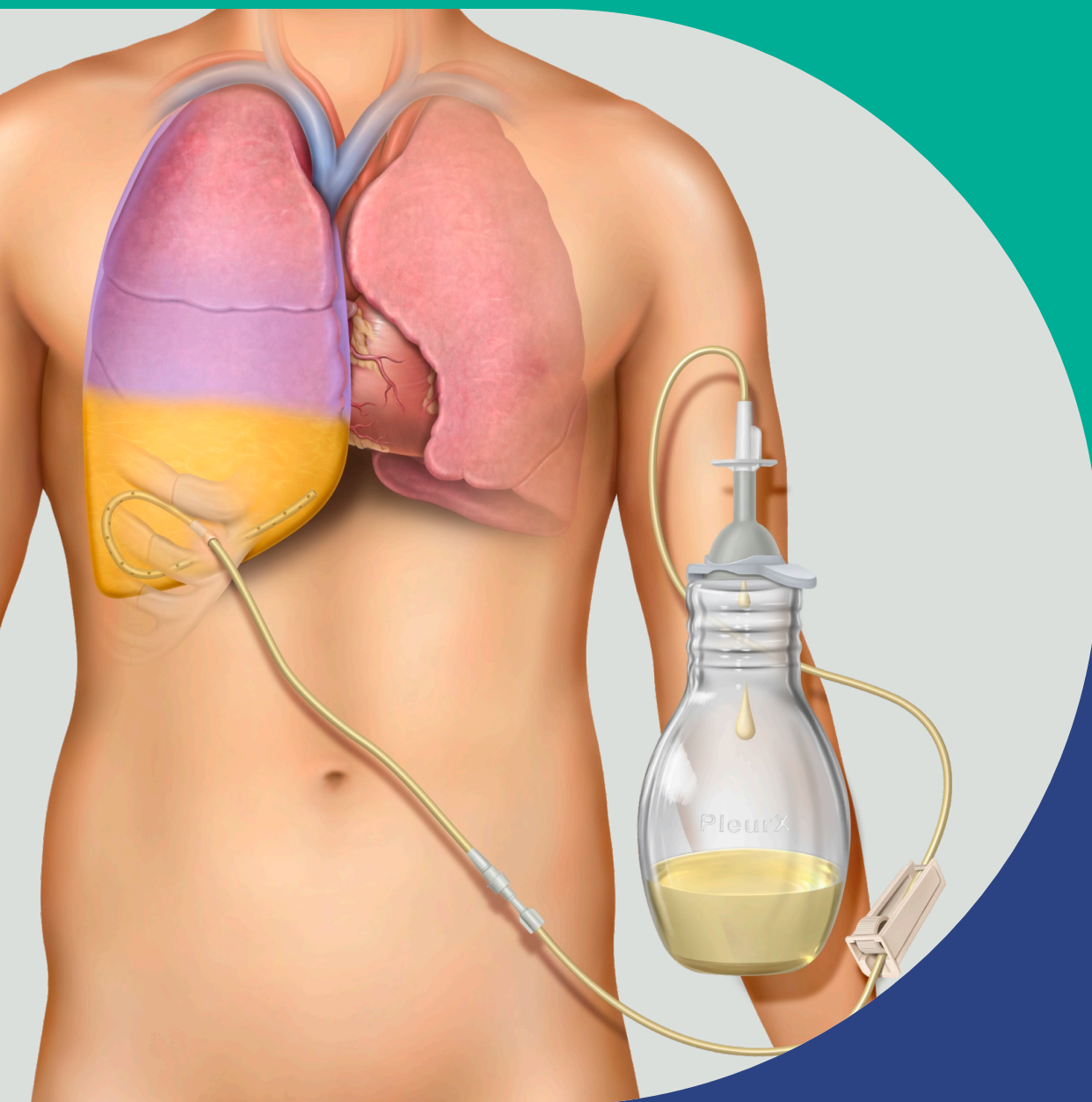

Projetado com tecnologia de vácuo ativo para ajudar a facilitar a drenagem do líquido pleural, o Sistema de Cateter Pleural PleurX™ permite que seus pacientes gerenciem o líquido de um derrame pleural em casa.

O Sistema de Cateter Pleural PleurX™ é indicado para drenagem intermitente e de longo prazo de derrame pleural sintomático, recorrente, incluindo derrames pleurais malignos e outros derrames recorrentes que não respondem ao tratamento médico da doença subjacente. O dispositivo é indicado para palição da dispneia por derrame pleural e pleurodese (resolução do derrame pleural).

### Foco no paciente

- Permite que os pacientes gerenciem fluidos no conforto de sua casa, reduzindo a necessidade de procedimentos de toracocentese repetidos
- Suprimentos de drenagem estão disponíveis por meio de um dos maiores fornecedores de produtos médicos descartáveis diretos ao paciente com certificação Medicare, em conformidade com a HIPAA

### Suporte clínico

- Nossa equipe de Especialistas Clínicos podem fornecer treinamento de produtos.

### Frasco a vácuo

A tecnologia de vácuo ativo drena rapidamente sem a necessidade de gravidade. Os frascos estão disponíveis nos tamanhos de 500 mL e 1.000 mL.

### Braçadeira de rolo

A braçadeira de rolo proporciona fácil controle do fluxo de drenagem para o máximo conforto.

### Válvula de segurança exclusiva

A válvula ajuda a evitar a passagem inadvertida de ar ou fluido através do cateter. Também ajuda a reduzir o risco de desconexão que pode ocorrer com uma conexão luer padrão.

### Fenestrações

Fenestrações grandes e suaves promovem a drenagem e ajudam a reduzir o risco de oclusões.

### Faixa de bário

A faixa de bário escura proporciona maior visibilidade em fluoroscopia.

### Manguito de poliéster

Promove o crescimento do tecido e pode ajudar para manter o cateter firmemente no lugar.

### Cateter de silicone 15,5 Fr

Cateter macio e flexível conforma-se ao espaço pleural e ajuda a minimizar o desconforto no local de inserção.



50-7050 – MINI KIT PARA CATETER PLEURAL PleurX™



50-7050 - O Mini Kit para Cateter Pleural PleurX™ contém:

| Componentes de colocação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Componentes de drenagem                                                                                                                                                                                               | Componentes de curativo                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Cateter Pleural PleurX™ (15.5 Fr; 66 cm)</li><li>• Introduutor de fio-guia com agulha</li><li>• Seringa, 10 mL</li><li>• Fio-guia com ponta em J, 60 cm</li><li>• Introduutor removível, 16 Fr; 13,7 cm comprimento do dilatador; 10 cm comprimento da bainha</li><li>• Tunelizador</li><li>• Espuma de agulha</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Linha de drenagem com trava com ponta de acesso</li><li>• Agulha, 17 G x 1 pol. (2,5 cm)</li><li>• Adaptador de linha de drenagem 5 em 1</li><li>• Tampa de válvula</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Compressas de gaze, 4 pol. x 4 pol. (10,2 cm x 10,2 cm, Qde. 6)</li><li>• Almofada de cateter de espuma</li><li>• Curativo autoadesivo</li><li>• Adesivo de número de lote (para rastreabilidade)</li></ul> |

## #50-7235A: TAMPA DA VÁLVULA DE SUBSTITUIÇÃO

(Para uso com o Sistema de Cateter Pleural PleurX™ ou Sistema de Cateter Peritoneal PeritX™)  
A tampa da válvula ajuda a proteger o cateter da contaminação e ajuda a manter um caminho de drenagem limpo. Uma tampa de válvula está incluída no kit de drenagem e deve ser substituída cada vez que o paciente drenar.



# PleurX™

Sistema de Cateter Pleural

| SKU      | Descrição                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50-7050  | Mini Kit para Cateter Pleural PleurX™                                                            |
| 50-7235A | Tampa de válvula de substituição para uso com o Sistema de PleurX™ ou sistema de Cateter PleurX™ |
| 50-8210  | Garrafa de vácuo PleurX™ de 1.000 ml com tubo de Drenagem                                        |

[www.bd.com/pleurX](http://www.bd.com/pleurX)

© 2023 BD. BD, BD Logo e todas as outras marcas registradas são propriedade da Becton, Dickinson and Company. Conforme requerido, o(s) produto(s) BD citado(s) encontram-se devidamente regularizado(s) junto à ANVISA. Para mais informações, contacte a BD em SAC: 0800 055 5654 ou [cs\\_brasil@bd.com](mailto:cs_brasil@bd.com). Consulte os rótulos e instruções de uso do produto para qualquer indicação, contraindicação, riscos, advertências, cuidados e instruções de uso. Banco de imagens BD. BD-95015

