


Fios de Localização Mamária

Guiando o caminho




Seguindo em frente com o que há de mais inovador em localização mamária

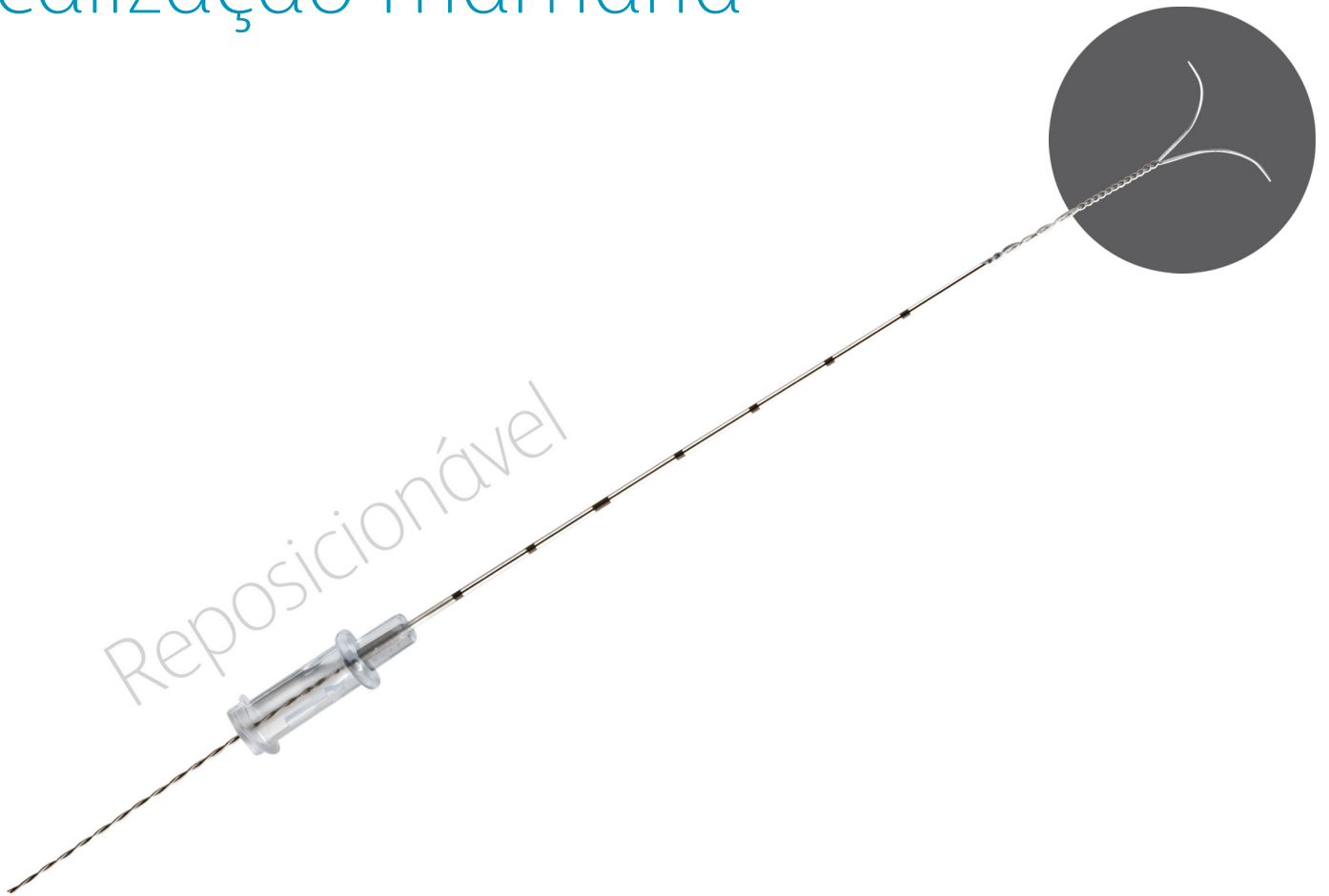

DuaLok®

Fio de Localização Mamária

- Projetado para ser fixado em local seguro pode ser removido para reposicionamento superior à migração e permite o reposicionamento após a colocação.
- Elementos de trava curvados proporcionam resistência superior à migração
- Construção resistente do fio por ser torcido

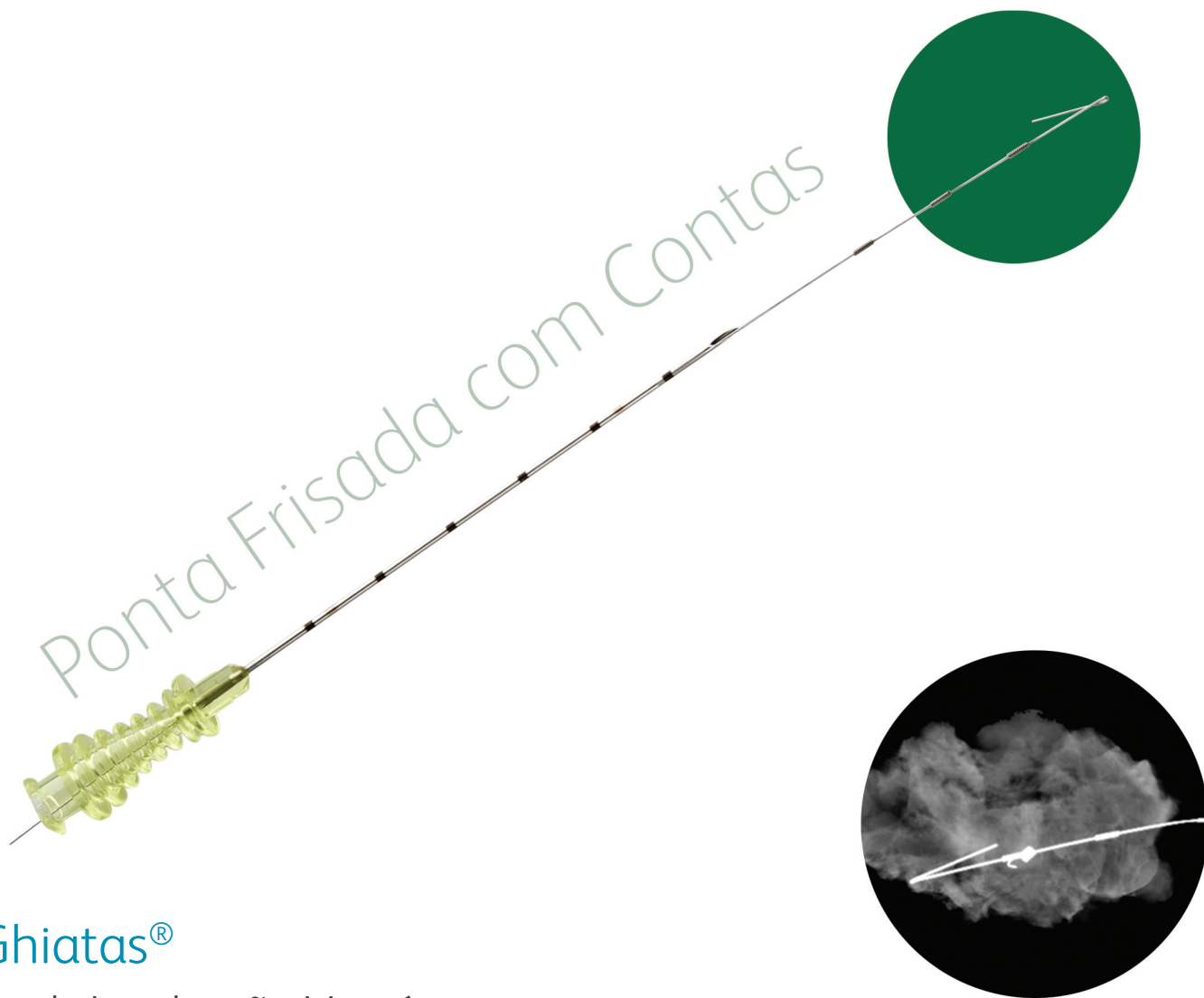

Ghiatas®

Fio de Localização Mamária

- As contas colocadas em intervalos de 1 cm neste fio produzem uma referência visual rápida da lesão e proporcionam excelente ponto de referência palpável para o cirurgião.
- Versões compatíveis com RM disponíveis
- O posicionamento da parte frisada com contas oferece ponto de referência palpável para auxiliar na colocação do fio
- Também disponível em seção rígida

Ghiatas® Ponta frisada com contas
Fio de Localização Mamária

Informações de Produtos

| Bard® Dualok® Fio de Localização Mamária | |
|--|-----------------------|
| Código do Produto | Calibre x Comprimento |
| LW0037 | 20g x 37mm |
| LW0057 | 20g x 57mm |
| LW0077 | 20g x 77mm |
| LW0107 | 20g x 107mm |
| LW0137 | 20g x 137mm |

| Ghiatas® Ponta frisada com contas, Fio de localização mamária | | |
|---|--|---------------------|
| Código do produto | Agulha introdutora (Calibre x Comprimento) | Fios de localização |
| 47320 | 20g x 3cm | 15cm |
| 47520 | 20g x 5cm | 15cm |
| 47720 | 20g x 7cm | 20cm |
| 47920 | 20g x 9cm | 20cm |
| 47020 | 20g x 14cm | 35cm |
| 47519 | 19g x 5cm | 15cm |
| 47919 | 19g x 9cm | 20cm |

| Ghiatas® Ponta frisada com contas, Fio de localização mamária para RM | | |
|---|--|---------------------|
| Código do produto | Agulha introdutora (Calibre x Comprimento) | Fios de localização |
| 475201 | 20g x 5cm | 15cm |
| 477201 | 20g x 7cm | 20cm |
| 479201 | 20g x 9cm | 20cm |
| 470201 | 20g x 14cm | 35cm |

| Bard® Ghiatas® Fio de localização mamária frisado com contas com seção rígida | | |
|---|--|---------------------|
| Código do produto | Agulha introdutora (Calibre x Comprimento) | Fios de localização |
| 49520 | 20g x 5cm | 15cm |
| 49720 | 20g x 7cm | 20cm |
| 49920 | 20g x 9cm | 20cm |

| Bard® Cânulas rígidas de ponta arredondada | |
|--|-------------------------------------|
| Código do produto | Calibre x Comprimento |
| | 20g x 5cm Cânula rígida arredondada |
| | 20g x 7cm Cânula rígida arredondada |
| | 20g x 9cm Cânula rígida arredondada |

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO: A guia de localização de lesão mamária, destina-se a ser utilizada como guia para orientação de biopsias cirúrgicas. **CONTRA-INDICAÇÕES:** Não se conhecem. **ADVERTÊNCIAS:** Assim que a farpa tiver sido posicionada no interior da mama, o fio tem de ser removido cirurgicamente. Não tente reposicionar, deslocar ou puxar o fio, pois tal pode resultar em dano/quebra do mesmo. (Isso não se aplica ao Fio de localização mamária Bard Dualok. O fio destina-se apenas a servir como guia. Não o utilize como retractor. Tenha cuidado durante a excisão, cirúrgica da lesão de modo a evitar cortar o fio com o bisturi. Deve avançar o fio através da agulha apenas do conector até à ponta da agulha. Não tente introduzir o fio ou fazê-lo avançar em sentido inverso dentro da agulha, pois tal pode danificar a farpa. Não tente remodelar a farpa do fio, seja de que forma for, isto pode quebrar a farpa. Se a farpa do fio estiver deformada ou dobrada de forma incorreta, elimine o produto. Deve ter-se cuidado ao utilizar qualquer fio de localização em doentes com próteses mamárias, de modo a não perfurar as mesmas durante o posicionamento ou o transporte. **NOTA:** Depois de utilizado, este produto pode constituir um risco biológico potencial. Manusear e eliminar de acordo com as práticas médicas aprovadas e com a legislação e regulamentos locais, estatais e federais aplicáveis. **PRECAUÇÕES:** Estes dispositivos só devem ser utilizados por um médico com formação na utilização indicada, nas suas limitações e possíveis complicações das técnicas de intervenção com agulhas percutâneas. A introdução do dispositivo no corpo deve ser efetuada sob controlo imagiológico. Antes de utilizar, inspecione o dispositivo no que respeita a danos que possam impedir o seu funcionamento correto. **POSSÍVEIS COMPLICAÇÕES:** As potenciais complicações são específicas do local e poderão consistir em hematoma; hemorragia; infecção; lesão dos tecidos adjacentes; dor; sangramento; hemoptise; hemotórax; perfuração de tecido, órgão ou vaso não alvo; e pneumotórax.

| | |
|--|-------------|
| FIOS DE LOCALIZAÇÃO GHIATAS PARA RM BARD | 80689090044 |
| FIOS DE LOCALIZAÇÃO MAMÁRIA GHIATAS BARD | 80689090045 |
| FIOS DE LOCALIZAÇÃO BARD DUALOK | 80689090026 |

Av. Alexandre Dumas, 2100 - 10º andar - Chácara Santo Antonio, 04717-004 - www.bardbiopsy.com
 Consulte os folhetos e rótulos do produto para quaisquer indicações, contra-indicações, riscos, avisos, cuidados e informações de uso. Bard, Dualok® e Ghiatas® são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da C. R. Bard, Inc. ou uma de suas afiliadas. Todas as outras marcas registradas são de propriedade de seus respectivos detentores.
 ©2009 C. R. Bard, Inc. Todos os direitos reservados. BRB190835-R00 - Ago/19

bd.com

