


UltraCLIP[®] DUAL
TRIGGER
Marcadores de Tecido Mamário



Marcadores permanentes para
ultrassonografia disponíveis em 2 formatos



Laço

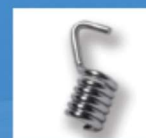

Espiral

UltraClip[®] Dual Trigger

Visivelmente Melhor



Visivelmente Melhor. . . Agora, Depois, Sempre.

O marcador mamário UltraClip® Dual Trigger proporciona **visibilidade permanente** no ultrassom além de ter um design ergonômico com duas opções de gatilho, um frontal e outro posterior.



Visibilidade

- O marcador está entrelaçado com um polímero não absorvível que garante a visibilidade permanente no ultrassom;
- Os diferentes formatos permitem a colocação do marcador em diversos locais;
- Opções de visualização em Ressonância Magnética.

Precisão

- A agulha de 17g contribui para a colocação precisa do marcador mamário;
- Os marcadores de 3mm tem design exclusivo para evitar a migração;
- Os marcadores são fixados de forma precisa nas lesões, pois não foram mergulhados em colágeno ou gel.

Simplicidade

- A colocação do marcador pode ser feita com uma única mão e única etapa;
- Gatilho duplo de acordo com a preferência do usuário;
- Gatilhos codificados para identificar os diferentes formatos dos marcadores.

Cada marcador contém um polímero entrelaçado para aumentar sua visualização em ultrassonografias.

Ao contrário dos plugs de colágeno ou de gel, os polímeros entrelaçados não são absorvíveis, garantindo por muitos anos sua visibilidade.

O polímero não absorvível garante a visibilidade permanente



Laço



Espiral

Os marcadores estão disponíveis em diferentes materiais para proporcionar diferentes níveis de visualização em Ressonância Magnética.



Marcador em laço de Titânio
Tamanho 0.08



Marcador Espiral BioDur® 108
Tamanho 0.63

RM usando Sequência de Pulso Gradiente Eco-Eixo Longo.
Produto medido em centímetros quadrados.

CÓDIGOS

Código do Produto	Tamanho	Código de cor	Ítem	Marcador Formato
863017D 863017DL	17g x 10cm 17g x 12cm		UltraClip® Dual Trigger Marcador Avançado para Ultrassonografia (Laço)	
864017D 864017DL	17g x 10cm 17g x 12cm		UltraClip® Dual Trigger Avançado para Ultrassonografia (Espiral)	

MARCADOR DE TECIDO MAMÁRIO ULTRA CLIP DUAL TRIGGER - TITÂNIO	80689090031
MARCADOR DE TECIDO MAMÁRIO ULTRA CLIP DUAL TRIGGER - BIODUR	80689090033

Av. Alexandre Dumas, 2100 - 10º andar - Chácara Santo Antonio, 04717-004 - www.bardbiopsy.com
Consulte os folhetos e rótulos do produto para quaisquer indicações, contraindicações, riscos, avisos, cuidados e informações de uso. Bard, UltraClip® é marca comercial e/ou marca comercial registrada da C. R. Bard, Inc. ou uma de suas afiliadas. Todas as outras marcas registradas são de propriedade de seus respectivos detentores. ©2009 C. R. Bard, Inc. Todos os direitos reservados. BRB190836-R00 - Set/19

bd.com

